



ルビスタ® 嘔吐物処理キット

用 途

●嘔吐物などの汚物処理用

「使用方法」に関する注意

●用途以外では使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●食べられません。●処理後、使用したキットは保存せずに、お住まいの地域の規定に従って破棄してください。キット内の吸水ポリマーシートおよびペーパータオルはトイレに流さないでください。●ご使用になる前に、キットに付属の「嘔吐物処理キットの使用方法」をよく読んでからお使いください。

環境除菌・洗浄剤 ルビスタ® パウダー

用 途

●嘔吐物などで汚染された環境表面の除菌・洗浄

使用方法

●本品1包(3g)に対してキットに付属の調製用水で溶かし、調製液を作製してください。調製液はピンク色を呈します。キットに付属の「ルビスタ嘔吐物処理キットの使用方法」の手順に従い正しく使用(処理)を行ってください。

「使用方法」に関する注意

●定められた「使用方法」を厳守してください。●手袋(ゴム・プラスチック等)を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。●大理石や銅、亜鉛などの軟鋼は、酸化作用により劣化する恐れがありますので使用しないでください。

成 分

●酸化剤(ペルオキソー硫酸水素カリウム)
●界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
●添加物:着色料、香料 ●液性:酸性

嘔吐物処理キットの規格

品名	製品イメージ	内容量/規格	サイズ: 高さ×幅×奥行き(mm)	重量(g)	メーカー希望 小売価格(税抜き)	JANコード
ルビスタ 嘔吐物処理キット		●環境除菌・洗浄剤 ルビスタパウダー 1包 ●添付文書 1枚 ●PPE(使い捨てマスク・ 使い捨てエプロン・ 使い捨て手袋) 各1組 ●調製用水 1本 ●吸水ポリマーシート 1枚 ●ペーパータオル 40枚 ●ポリ袋 1枚 ●使用方法説明書 1枚	90×256×178	691	2,700	4 987060 008121

保管および取扱い上の注意

●本品は常温で保管してください。●ご使用後はお住まいの地域の規定に従って廃棄してください。●本品の使用期限は製造月から36ヶ月です。

使用上の注意



小児の手の届く
ところに保管しない



飲むくすりでは
ありません

●用途以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●本品および調製液を飲み込まないようにしてください。誤って飲み込んだ時は、速やかに医師の診察を受けてください。医師の指示がない限り、無理に吐かせないでください。意識のある場合には、十分な水を飲ませ、意識のない場合には、何も与えないでください。●目に入らないように注意してください。目に入った場合には、速やかに水で洗い流してください。その後、速やかに医師の診察を受けてください。●本品、調製液を取り扱う際には、ゴム手袋、プラスチック手袋等を使用してください。●本品、調製液との接触により、手荒れ・発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。●調製液が肌についた場合には、速やかに十分な水で洗い流してください。

保管および取扱い上の注意

●本品は常温で保管してください。●ご使用後はお住まいの地域の規定に従って廃棄してください。●本品の使用期限は製造月から36ヶ月です。

嘔吐物の簡単・迅速な処理に

ルビスタ®

おうと
嘔吐物処理キット



このような場所での嘔吐物・汚物処理にご使用ください

クリニックの待合室など




介護施設の談話室など



幼稚園・保育園など



交通機関(電車、バス)など

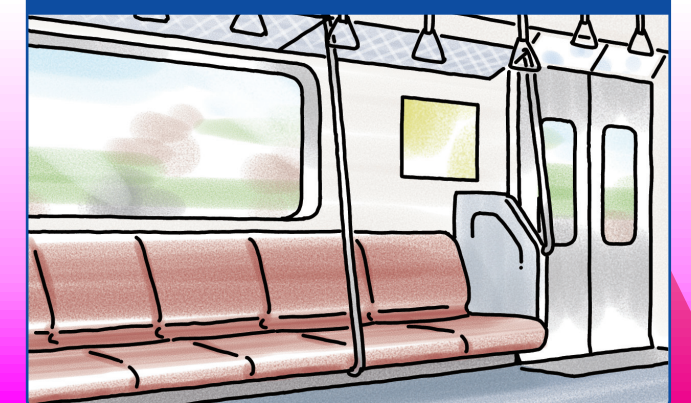

【お問合せ窓口】杏林製薬株式会社 0120-093610 受付時間 9:00~17:00(月~金 ※土日祝日除く)

販売元: 杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

発売元: キョーリン メディカルサプライ株式会社
東京都新宿区西新宿6丁目25番地13号

www.rubysta.jp
ルビスタの製品情報サイトはこちら

改訂年月:2014.8
RST 7001

杏林製薬株式会社 / キョーリン メディカルサプライ株式会社

嘔吐物には感染性微生物が含まれることがあり、感染拡大防止のため迅速な処理が必要です。


ルビスタ®嘔吐物処理キットの製品特長

嘔吐物処理に必要な器材がすべてキットに梱包されています。

適切な嘔吐物処理を簡単・迅速に行うことができます。

吸水ポリマーシートで嘔吐物を覆うことにより、汚染拡大を防止できます。

ルビスタ®嘔吐物処理キットの内容物一覧

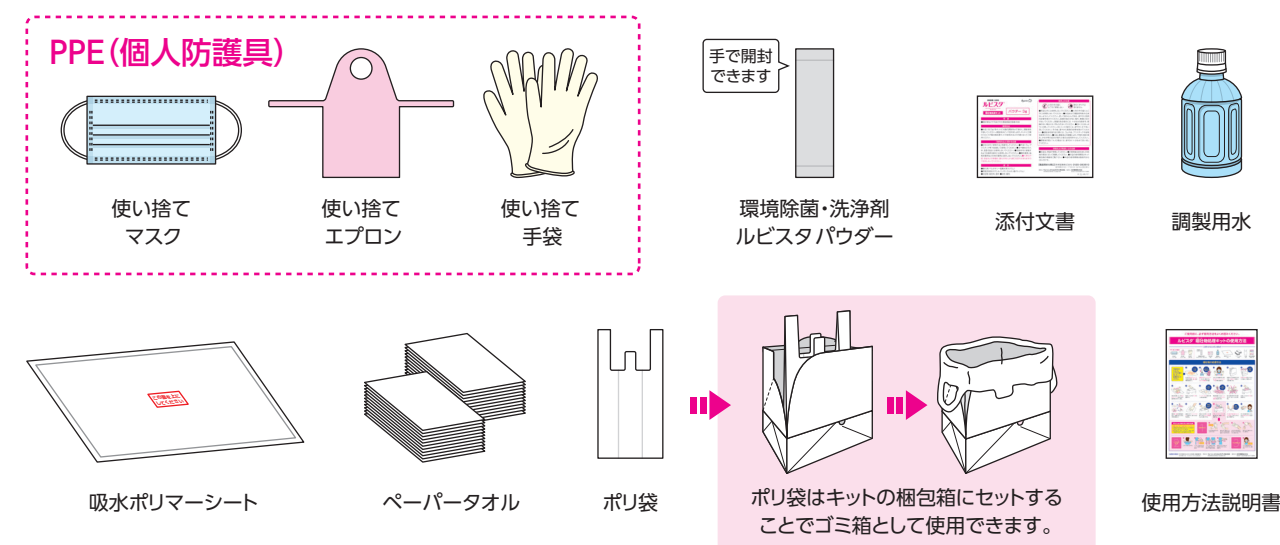

ルビスタ®嘔吐物処理キットを用いた嘔吐物処理の流れ



ルビスタ®嘔吐物処理キットの使用方法

